


ウリナリードレナージバッグ 下方排出口付閉鎖式ドレナージシステム;再使用禁止

使用方法

1. チューブ先端のキャップを取り外して、ウロパウチ(またはカテーテル)側の排出口に接続してください。
2. ウリナリードレナージバッグ上部の掛け具をベッドフレーム等へ吊してください。
3. チューブを固定する場合は、チューブに付いた留め具の位置を調整してください。
4. ウリナリードレナージバッグに溜まった尿を排出する場合は、バッグ下部のポケットより排出口を取り出し、排出弁を開いて尿を排出します。
5. 尿のサンプルを採取するときは、消毒剤を含ませたガーゼ等で採取口を拭き、クランプでチューブを閉じてから尿採取用の注射針を使用して採取してください。 **バッグに針が刺さらないようご注意ください**

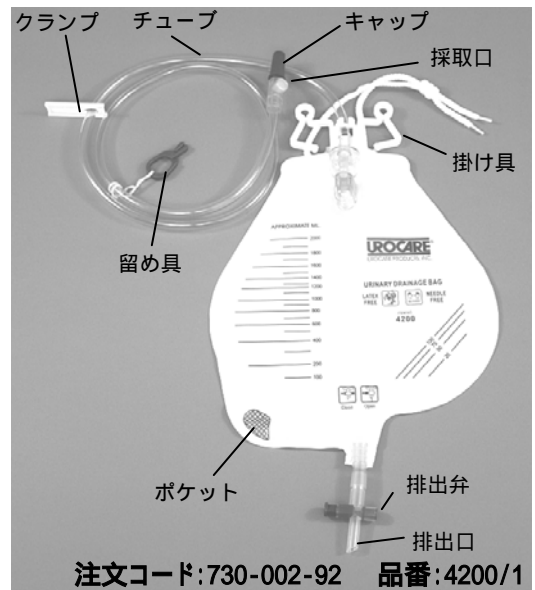

使用上の注意

- ウリナリードレナージバッグは縦に吊したままの状態を保てるようにし、必ず患者の膀胱位置より低い位置に配置してご使用ください。
- 使用中は、ウロパウチ(またはカテーテル)とウリナリードレナージバッグの接続部分を外さないようにしてください。
- ウリナリードレナージバッグを寝かせる場合は、必ずクランプでチューブを挟み込み、チューブが閉じられているのを確認してください。
- 尿を排出するとき以外は、排出口をバッグ下部のポケットへ収納してください。


2009年08月24日作成

Muranaka 村中医療器 株式会社
<http://www.muranaka.co.jp/>
 介護ケアグループ 〒540-0036 大阪市中央区船越町2丁目3-6
 ☎06-6943-1613 FAX 06-6943-1619
 札幌・仙台・東京・埼玉・名古屋・金沢・大阪・米子・広島・福岡

ウリナリードレナージバッグ 下方排出口付閉鎖式ドレナージシステム;再使用禁止

使用方法

1. チューブ先端のキャップを取り外して、ウロパウチ(またはカテーテル)側の排出口に接続してください。
2. ウリナリードレナージバッグ上部の掛け具をベッドフレーム等へ吊してください。
3. チューブを固定する場合は、チューブに付いた留め具の位置を調整してください。
4. ウリナリードレナージバッグに溜まった尿を排出する場合は、バッグ下部のポケットより排出口を取り出し、排出弁を開いて尿を排出します。
5. 尿のサンプルを採取するときは、消毒剤を含ませたガーゼ等で採取口を拭き、クランプでチューブを閉じてから尿採取用の注射針を使用して採取してください。 **バッグに針が刺さらないようご注意ください**

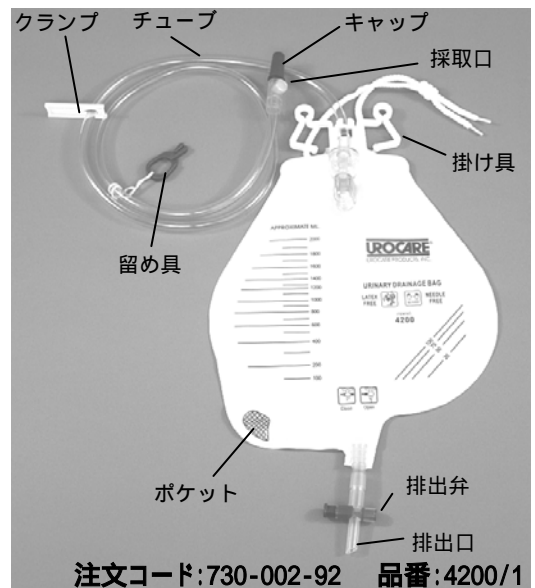

使用上の注意

- ウリナリードレナージバッグは縦に吊したままの状態を保てるようにし、必ず患者の膀胱位置より低い位置に配置してご使用ください。
- 使用中は、ウロパウチ(またはカテーテル)とウリナリードレナージバッグの接続部分を外さないようにしてください。
- ウリナリードレナージバッグを寝かせる場合は、必ずクランプでチューブを挟み込み、チューブが閉じられているのを確認してください。
- 尿を排出するとき以外は、排出口をバッグ下部のポケットへ収納してください。

2009年08月24日作成

Muranaka 村中医療器 株式会社
<http://www.muranaka.co.jp/>
 介護ケアグループ 〒540-0036 大阪市中央区船越町2丁目3-6
 ☎06-6943-1613 FAX 06-6943-1619
 札幌・仙台・東京・埼玉・名古屋・金沢・大阪・米子・広島・福岡