

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ウルトラミルクドライブラス,10L	233-026-02	¥22,000


※表示価格に消費税は含んでおりません。

ウォッシュャーディスインフェクター専用 乾燥促進・潤滑・防錆剤 **中 性**

ウルトラミルク ドライブラス

使用 方法 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。

使用上の注意 ●ステンレス(SUS304、316)以外の金属器具(アルミや真鍮などの非鉄金属製品には不向きです)及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用ください。●本剤をチューブ等で自動吸引する場合には、本剤に吸引チューブを差し込む前にチューブ内外を水で十分に洗浄し、清浄にしたチューブを差し込んでください。●希釈水に水道水を使用すると、水道水中のカルシウムなどのミネラルが析出し、乾燥後の器材に白いシミが残る場合がありますが、使用上特に問題ありません。軟化水やRO水を使用するとよりきれいに仕上がります。●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗いし(眼球とまぶたの隅々までよく洗う)、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば、医師の処置を受けてください。●誤飲した場合は口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲んでください。直ちに医師の処置を受けてください。●保管の際は、直射日光を避け、子供の手の届かない、涼しい場所に保管してください。●本剤の廃棄の際には、多くの水と共に排出してください。●体内に埋め込む器具(インプラント等)や防錆処理を必要としない医療器具には使用しないでください。

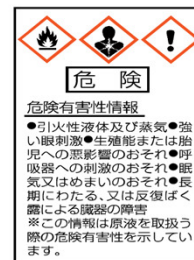

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 10 L

本 体: PE
 キャップ: PP
 ラベル: PP

発売元

Muranaka
 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社
 大阪市中央区船越町二丁目3番6号
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
プラム ウルトラミルクドライブラス,4L	233-022-03	¥9,800


※表示価格に消費税は含んでおりません。

ウォッシャーディスインフェクター専用 乾燥促進・潤滑・防錆剤 中 性

ウルトラミルク ドライブラス

使用方法 液体ディスペンサーに原液をそのまま投入してください。

使用上の注意 ●ステンレス(SUS304、316)以外の金属器具(アルミや真鍮などの非鉄金属製品には不向きです)及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用ください。●本剤をチューブ等で自動吸引する場合には、本剤に吸引チューブを差し込む前にチューブ内外を水で十分に洗浄し、清浄にしたチューブを差し込んでください。●希釈水に水道水を使用すると、水道水中のカルシウムなどのミネラルが析出し、乾燥後の器材に白いシミが残る場合がありますが、使用上特に問題ありません。軟化水やRO水を使用するとよりきれいに仕上がります。●使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗いし(眼球とまぶたの間々までよく洗う)、医師の処置を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば、医師の処置を受けてください。●誤飲した場合は口の中の水を水で洗い、水又は牛乳を飲んでください。直ちに医師の処置を受けてください。●保管の際は、直射日光を避け、子供の手の届かない、涼しい場所に保管してください。●本剤の廃棄の際には、多くの水と共に排出してください。●体内に埋め込む器具(インプラント等)や防錆処理を必要としない医療器具には使用しないでください。

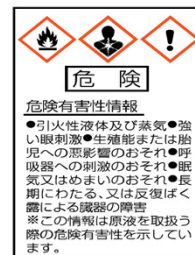

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 40

本体: PE
 キャップ: PP
 ラベル: PP

発売元

Muranaka
 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

大阪市中央区船越町2-3-6 Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512