

PG8592の特長③

省スペース設計

600×600mmの外寸法により、給排水・電気設備があればあらゆる場所に設置いただけます*。
写真のように収納棚や流し台にビルトイン設置することもできます。

PG8592の本体寸法
間口600mm、奥行600mm、高さ835mm（架台装着時：1235mm）
※装置の運転に必要な設備は、弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。



PG8592の特長⑤

特殊な器械への対応

1.眼科手術器械

微細な内腔器具にも対応可能な、各種コネクタを装備しています。
特に、内径1mmに満たない細腔針は、ルアーロック構造により確実に固定して処理できる他、細腔部に異物（骨片や金属片など）が詰まらないよう、洗浄水の灌流経路内に直径63μmのマイクロフィルター（オプション）を装着できます。




眼科ラック本体



細腔針装着例



マイクロフィルター

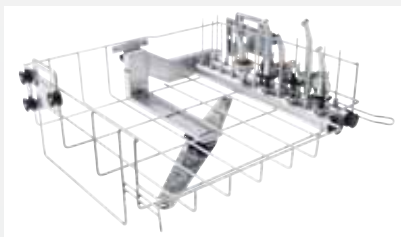


ハンドピース用ラック本体

PG8592の特長④

軟水装置内蔵

水道水に含まれ、洗浄効果を減退させるカルシウムやマグネシウムなどの陽イオンを、内蔵する軟水装置が除去します。PG8592の庫内には常に軟水が供給されるため、安定した洗浄効果を実現します。

※軟水器は定期的な再生処理が必要です。再生には専用の活性塩（注文コード：066-011-04）をご利用下さい。
再生処理の頻度は原水により異なります。

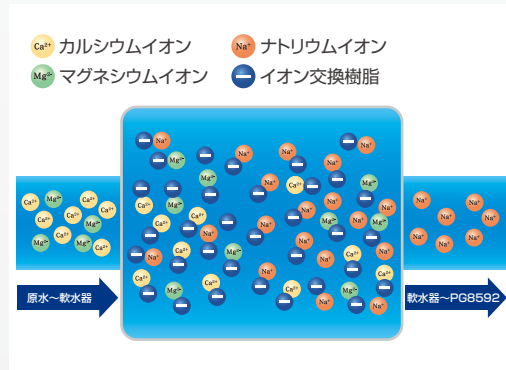

2.各種ハンドピース

専用アダプターの装着により、各種ハンドピースにも適用できます。

※ハンドピースの種類によっては適用外の場合があります。
詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

一般医療機器
届出番号：14B2X10032000015
販売名：ミーレジェットウォッシャーPG8592

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.
村中医療器 株式会社
<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363

P1803.25000

標準価格改定のご案内

平成28年5月の発売開始より、多くの医療施設でご採用いただいたドイツ ミーレ社製ウォッシャー・ディスインフェクターPG8592の本体標準価格を、昨今の為替状況を反映し、平成29年10月より下記の通り改定いたしました。

国内での販売開始より30年以上、国内総納入台数600台以上*の“信頼ブランド ミーレ社製ウォッシャー・ディスインフェクター”をさらに求めやすい価格でご提供いたします。

(※旧機種、別型機種含みます)

平成29年9月30日までのご注文

平成29年10月1日以降のご注文

標準価格

¥2,980,000

新標準価格

¥2,500,000

適用機種 066-001-19 ミーレ ジェットウォッシャーPG8592 50Hz
066-001-20 ミーレ ジェットウォッシャーPG8592 60Hz

新価格によりさらにお求めやすくなった一方、
以下に記載するPG8592の様々な特長は変わらずご利用いただけます。

PG8592の特長①

使用済み手術器械を全自動処理！

洗浄作業者は、手術や診察により患者の血液や体液で汚染した手術器械をPG8592に収納してスタートさせるだけで、操作は完了です*。
洗浄・熱水消毒・乾燥をPG8592が全自動で処理しますので、安全性・作業効率の向上を実現します。

※汚染の状態によっては、前洗浄が必要な場合があります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。

PG8592の一般的な運転プログラム

予備洗浄 → メイン洗浄 → すすぎ① → すすぎ② → 最終すすぎ(熱水消毒) → 温風乾燥

※使用する洗剤の種類や水質によって運転条件が異なる場合があります。
※一般的な運転時間は90～100分です。



MAR11

バスケット※12枚分の洗浄物処理時のランニングコストを約75%削減

※ W480×D250×H50mm

手洗い洗浄に要するランニングコスト

