



PARI ボーイモバイルS コードレスキャンペーン

充電可能なバッテリーパックの装着で、いつでも手軽に吸入治療が行えます。

期間限定

2017年11月21日～2018年1月20日まで

今が
お得!

専用バッテリーパック



リチウムイオン電池を使用しており、フル充電で約45分間(薬剤2.5mlの吸入が約8回分)の使用が可能です。



PARI ボーイモバイルS
標準価格 ¥24,000

PARI ボーイモバイルS用 専用バッテリーパック

注文コード：M23-004-54

標準価格

¥19,500

期間限定特別価格

¥10,000

※PARI ボーイモバイルS本体は含まれません。

PARI ボーイモバイルS



軽くて小さい!

軽量(360g)で携帯にも便利。
手で効果的な吸入療法を可能にした吸入器

PARI社製コンプレッサー
の中で一番小さい

注文コード	M23-001-09
品番	047G1002
標準価格	¥24,000
吸入器仕様	
電源:	AC100V 50-60Hz
流量:	3.8ℓ
重量:	約360g
外形寸法:	約W4.5×D11.3×H8.9cm
保証期間:	2年(コンプレッサー)*
一般医療機器	
届出番号:	27B1X00024000321
販売名:	PARI ボーイモバイルS

*保証の対象はコンプレッサーのみとなります

エアロゾルの特性	
分時噴霧量:	440mg/分
粒子径中央値:	3.8μm
5μm以下の粒子質量比率:	65%
<small>(測定条件) 使用電源: 100V 60Hz 試験液: 0.9%生理食塩水(5ml) 室温: 23℃、湿度: 50% 測定装置: Malvern社 Master sizer X 流量: 3.8ℓ/分 分時平均吸気流量: 12ℓ/分</small>	

適応症
気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、 気管支拡張症等の下気道疾患

■PARI 製品のお問い合わせ

0120-799-221

携帯:PHS OK

受付: 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日を除く)

PARI LCスプリントネブライザー

- ・さらに粒子径が細くなり、下気道沈着に適した粒子が効率よく発生。
分時噴霧量の増加により吸入時間が短縮されます。
- ・部品数も少なくお手入れも簡単。

最軽量で携帯にも大変便利!

- ・小さいながらもパワフルなコンプレッサーで効果的な吸入治療が行えます。
- ・別売品のバッテリーパックを装着していても520gという軽さでどこへでも携帯可能です。

小児用ソフトマスクでお子様の吸入効率も向上!


- ・異なる二つの素材(PPとTPE)が結合して作られた新型ソフトマスク、皮膚に接する部分は柔らかく、
お顔に優しくフィットします。マスクに組み込まれた呼吸バルブとマスク内側の漏れを防ぐシールドに
よってエアロゾルのロスを最小限に抑制します。
- ・2種類(くるりん・びかりん)のうち、いずれかが付いています。

衛生面でのメリット

ネブライザーの部品に安全なポリプロピレンとTPEを使用しています。
煮沸消毒(15分間)
オートクレーブ滅菌(121℃/20分、132~134℃/3分)
ポリプロピレン樹脂に適した消毒液による消毒。

標準セット内容

- 吸入器本体
- PARI LCスプリント
ネブライザー(インサート 青)
- 小児用ソフトマスク
- 送気ホース
- ACアダプター
- PARI フ렌ズ
- キャリングケース

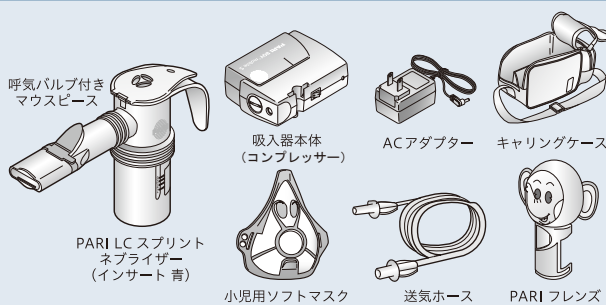

*小児用ソフトマスクは、くるりんもしくはびかりんのどちらかが付属しております。



※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363

P1711.4500