

期間限定

聴診器
血圧計

キャンペーン

キャンペーン
期間


2020年3月1日 >>> 7月20日



MMI® ワンハンド式
アナロイド血圧計



MMI® デジタル手動血圧計
コンフォール

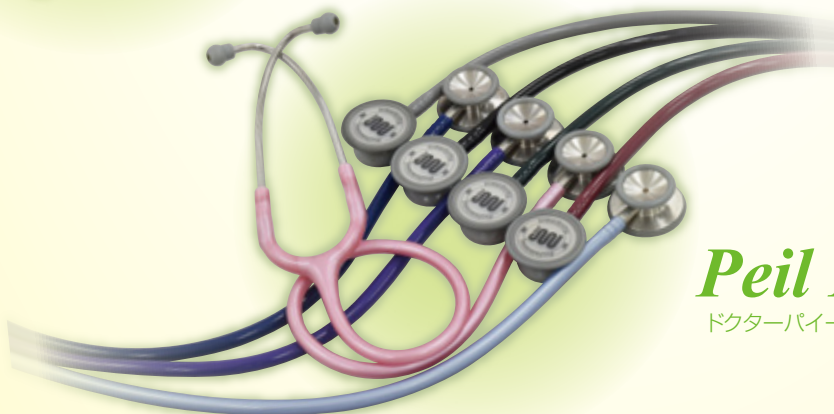

Peil BASIC
ドクターパイルベーシック聴診器

8色のカラーバリエーション



Peil BASIC

ドクターパイールベーシック聴診器

優れた音響効果

PFフローティング・ダイヤフラムの採用によりチェストピースを肌にあてたまま、押さえつける力の強弱で高調音と低調音の聴診が可能です。

ソフトな装着性を実現

耳にやさしくフィットするソフトタイプのイヤーチップ。

ノンチルスリーブを採用

患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません。

注文コード	品番	カラー	注文コード	品番	カラー
502-005-91	S601PF-GR	グレー	502-005-95	S601PF-NB	ネイビー
502-005-92	S601PF-BL	ブラック	502-005-96	S601PF-PU	パープル
502-005-93	S601PF-DGN	ダークグリーン	502-005-97	S601PF-PPI	パールピンク
502-005-94	S601PF-BUR	バーガンディ	502-005-98	S601PF-PB	パールブルー

標準価格

~~¥9,800~~

期間限定標準価格

¥6,000

(仕様)

- 全長：約780mm
- ダイヤフラム部サイズ：φ47mm
- ベル部サイズ：φ35mm
- 材質：
(チェストピース) ステンレス
(ダイヤフラム) ファイバーグラス
(ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ) ポリ塩化ビニル
(イヤーチップ) 熱可塑性エラストマー
- 重量：約160g
- 付属品：ソフトイヤーチップ(小) 1組、ハードイヤーチップ 1組

オールブラックコーティング仕様



CK-S601CPF
(MB) ベルタイプ

CK-S6016CPF
(MD) ダイヤフラムタイプ

Peil MEISTER

ドクターパイールマイスター聴診器

優れた音響効果

PFフローティング・ダイヤフラムの採用によりチェストピースを肌にあてたまま、押さえつける力の強弱で高音と低音の聴診が可能です。

ソフトな装着性を実現

耳にやさしくフィットするソフトタイプのイヤーチップ。

ノンチルスリーブを採用

患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません。

注文コード	品番	カラー	規格
502-018-37	CK-S601CPF	ブラック	(MB) ベルタイプ
標準価格 ¥15,800			
期間限定標準価格 ¥7,900			

注文コード	品番	カラー	規格
502-018-38	CK-S6016CPF	ブラック	(MD) ダイヤフラムタイプ
標準価格 ¥18,000			
期間限定標準価格 ¥9,000			


(仕様)

- 全長：約780mm
- ダイヤフラム部サイズ：(MB) φ47mm (MD) φ38/47mm
- ベル部サイズ：(MB) φ35mm
- 材質：(チェストピース) ステンレス鋼 (ダイヤフラム) ファイバーグラス (ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ) ポリ塩化ビニル (イヤーチップ) [標準]シリコーン [交換用]シリコーン、ポリ塩化ビニル
- 重量：(MB) 145g (MD) 155g
- 付属品：ソフトイヤーチップ (小) 1組、ハードイヤーチップ 1組

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000136
販売名：聴診器

MMI® 軽量型デュアルヘッド聴診器

軽量かつ高感度を実現します

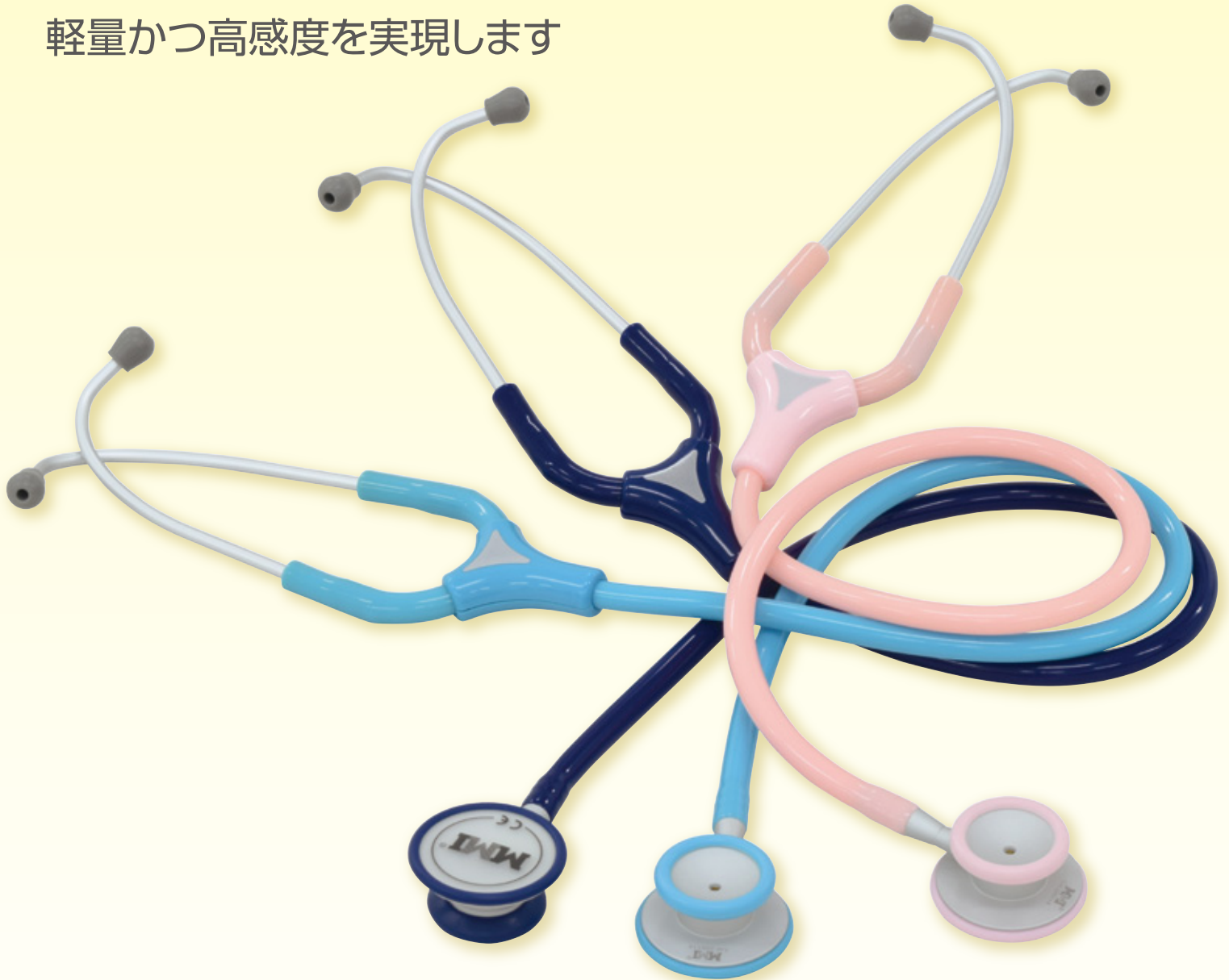

ダイヤフラム部



ベル部

(仕様)

- 全長：約780mm
- ダイヤフラム部サイズ：φ47mm
- ベル部サイズ：φ35mm
- 材質：(チェストピース) アルミニウム (ダイヤフラム) ファイバークラス
(ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ・イヤークリップ) ポリ塩化ビニル
- 重量：約105g
- 付属品：テンションナー、ソフトイヤークリップ(小・大)各1組

注文コード	品番	カラー
502-004-48	MMI-A601DP-BK	ブラック
502-004-49	MMI-A601DP-GR	グレー
502-006-20	MMI-A601DP-DB	ダークブルー
502-006-21	MMI-A601DP-LB	ライトブルー
502-006-22	MMI-A601DP-BP	ピンク

標準価格

~~¥4,500~~

期間限定標準価格

¥3,600

MMI® デジタル手動血圧計 コンフォール



ラテックス
フリー

洗える扇型のカフ*



*カフの汚れ等は、70%アルコールを含ませた布で軽く拭き取ってください。
カフの汚れ等が酷い場合は、内部の空気袋を取り外して手洗いができます。
カフの端にある面ファスナーを外し、空気袋をチューブごと取り出してください。

LEDバックライト内蔵

- 電源がONの間はバックライトが常に点灯します。
- 暗い場所や深夜病棟で使用できます。

安全機能

- 加圧中や測定中に電源スイッチを押すと電源が切れ、自動的にカフが減圧されます。

選べる測定モード

【自動モード】

- オシロメトリック法による測定ができます。
- 最高血圧・最低血圧・脈拍数を同時に測定できます。
- 前回測定値メモリー機能

【聴診モード】

- 聴診器を用いたコロトコフ法による測定ができます。
- ※自動測定はしません。
- ※脈拍は測定できません。

便利機能

- 大きく見やすい液晶表示
加圧中・測定中の圧力値は数字とバーで表示
- オートパワーオフ機能
- 正常に測定できなかった場合にエラー表示
- LEDバックライト内蔵

【仕様】

- 本体サイズ：W64×D41×H185mm ●重量：275g
- 材質：(上腕カフ) [カフナイロン (チューブ) ポリ塩化ビニル (コネクタ) ポリプロピレン (送気球) シリコン、ポリ塩化ビニル
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本 (付属)
- 測定方式：オシロメトリック法またはコロトコフ法
- 測定範囲：(血圧) 30~280mmHg (自動モード時)
(脈拍数) 40~199拍/分 (自動モード時)
- 測定誤差：(血圧) ±3mmHg以内 (自動モード時)
(脈拍数) ±5%以内 (自動モード時)
- 加圧方式：手動加圧 ●減圧方式：自動減圧
- オートパワーオフ機能：放置状態3分
- セット内容：本体、送気球、上腕カフ (Mサイズ)、携帯ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2

MMI デジタル手動血圧計 コンフォール

注文コード：502-026-56

標準価格

¥12,000

期間限定標準価格

¥9,600

管理医療機器
認証番号：230ADBZX00007000
販売名：MMI デジタル手動血圧計 コンフォール

MMI® ワンハンド式アナロイド血圧計

- 排気の微調整がしやすく操作性の良い血圧計です。
- ナイロン樹脂の軽量タイプ。
- 専用ポーチ付です。

MMI ワンハンド式アナロイド血圧計

注文コード：030-052-11

標準価格

~~¥10,000~~

期間限定標準価格

¥8,000

〔仕様〕

- 本体サイズ：W67×D75×H121mm
- 本体重量：230g (袋含まず)
285g (袋含む)
- メーターサイズ：67×67mm
- 測定可能腕周り：約220～320mm
- 測定範囲：20～300mmHg
- 測定誤差：±3mmHg



プッシュレバーバルブ



一般医療機器
届出番号：13B3X10017CA0005
販売名：MMI ワンハンドアナロイド血圧計

MMI® 大型アナロイド血圧計 (スタンド型)

大きな表示板で目盛間隔が広く、見やすい構造です。

- 五脚のキャスターを使っているので安定した移動ができます。

MMI 大型アナロイド血圧計 (スタンド型)

注文コード：030-052-12

標準価格

~~¥29,000~~

期間限定標準価格

¥23,200

〔仕様〕

- サイズ：W470×D470×H760～1200mm
- メーターサイズ：W160×D80×H160mm
- 測定可能腕周り：約220～320mm
- 測定範囲：20～300mmHg
- 測定誤差：±3mmHg



一般医療機器
届出番号：13B3X10017CA0003
販売名：MMI 大型アナロイド血圧計スタンド型

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123 (代) FAX092-474-1363