

New

ロータリーヒートシーラー

F110DEP-P/USB PROTEC

発売記念キャンペーン

期 間

2015年10月1日 >>> 2015年12月29日



標準価格

10%
DOWN

ロータリーヒートシーラー本体を
特別標準価格にて
ご提供いたします!

ロータリーヒートシーラー

F110DEP-P/USB PROTEC

ロータリーヒートシーラー本体

ISO
11607-2
適合

ローラーテーブル

※ローラーテーブルは別売です。

発売記念として
本体標準価格

10%DOWN

にてご提供いたします!

標準価格

~~¥980,000~~



特別標準価格

¥882,000

ロータリーヒートシーラーF110DEP-P/USB PROTEC

注文コード

717-003-01

品番

30.100.577

特別標準価格

¥882,000

付属品：RS-232Cケーブル、CD-ROM



パラメータ監視システム装備

シーリングの重要なパラメータである温度・圧力・速度の3要素があらかじめ設定した規定値に適合していることを自動監視し、監視情報は次の4つの方法で確認できます。万一の異常発生時にはディスプレイとエラー音を通じてお知らせします。

1 ディスプレイ



ディスプレイの専用画面を通じてリアルタイムでパラメータを確認できます。

2 印字情報



滅菌バッグに直接印字できるので装置のコンディションを簡単に記録できます。

3 USBポート



装置に標準装備されたUSBポートにUSBメモリを取付けることで監視情報をテキストファイル形式で記録・保存できます。

4 専用ソフトウェア



RS-232CポートとPCを付属のケーブルで接続することで専用ソフトウェアを使って監視情報を見ることができます。付属のソフトウェア※を外部PCにインストールすることで監視情報をリアルタイムで確認できます。

※付属のCD-ROMよりインストールして下さい。

※対応OS ... Windows 2000/XP/Vista/7/8




ユーザーフレンドリー

日本語に対応したディスプレイの採用により滅菌日、有効期限、ロット情報などをどなたでも簡単に設定できます。



滅菌バッグに印字する有効期間、日付、ロット番号の設定

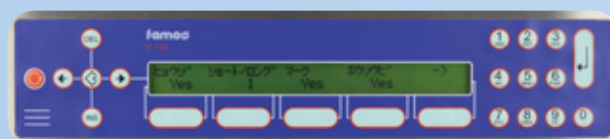

滅菌バッグに印字するマーク、滅菌日、文字の大きさ、印字の有無を設定



省電力設計

蓄熱性に優れたヒータ元素の採用により、停止中の放熱を最小化し、再加熱時に要する電力量を削減しました。

[補充品]

インクリボン ローターヒートシーラーF110DEP用

注文コード	品 番	標準価格
717-001-03	SZ-11360	¥1,900

[別売品]

F110DEP-P/USB PROTEC用ローラーテーブル

注文コード	品 番	標準価格
717-003-02	30.100.619	¥150,000

USBシリアル変換アダプター ローターヒートシーラーF110DEP用

注文コード	品 番	標準価格
717-003-03	USB-RSAQ6	¥5,530

※USBシリアル変換アダプターをご使用の際はアダプターに付属されている
取扱い説明書に記載のホームページよりアプリケーションをダウンロードして下さい。

仕 様

サイズ	(本体)W527×D314×H162mm (ローラーテーブル)W710×D422×H70mm
セットサイズ	W710×D634×H162mm
材 質	ステンレス
重 量	(本体)15kg (ローラーテーブル)5.8kg
電 源	AC100V 50-60Hz
消費電力	(最大)365W/(平均)70W
温度設定範囲	50～199℃
シール幅	12mm
シール送り速度	10m/分
印刷機能	(表示文字)絵文字／アラビア数字 (印刷項目)シール時の温度・圧力・速度 滅菌日(包装日)、有効期間(滅菌有効期間)、コード番号(ロット番号など) (日付表示設定)DMY=日・月・年、YMD=年・月・日、MDY=月・日・年(選択)
入力方式	テンキー入力
その他	デジタルメニューコントロール マイクロプロセッサコントロール オーバーヒート防止装置付
適 応	ラミネート包装紙、滅菌バッグおよび紙製包装袋、タイベック製品

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東 京 支 店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363

P1509.30000