

# キャンペーン商品一覧

(本体+ラベル1箱)



## メディカルハンドラベラー

Medical Hand Labeler

| 注文コード             | 品 番                | セット内容              | ラベル |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----|
| <b>L92-001-31</b> | B12/2616R/R/K.V20  | 本体 + カラーラベル (レッド)  |     |
| <b>L92-001-32</b> | B12/2616R/B/K.V20  | 本体 + カラーラベル (ブルー)  |     |
| <b>L92-001-33</b> | B12/2616R/Y/K.V20  | 本体 + カラーラベル (イエロー) |     |
| <b>L92-001-34</b> | B12/2616R/GN/K.V20 | 本体 + カラーラベル (グリーン) |     |
| <b>L92-001-35</b> | B12/2616R/O/K.V20  | 本体 + カラーラベル (オレンジ) |     |
| <b>L92-001-36</b> | B12/2616R/GY/K.V20 | 本体 + カラーラベル (グレー)  |     |

標準価格  
~~¥31,800~~

期間限定標準価格  
**¥15,000**

●本体サイズ：約W60×L250×H125mm ●本体重量：約360g ●ラベル入数：1パック(1000枚×12巻入) ●インクロール1個付



## ラベルガン Premium

Label Gun Premium

| 注文コード             | 品 番           | セット内容                 | ラベル |
|-------------------|---------------|-----------------------|-----|
| <b>717-002-51</b> | 15.300.282PB  | 本体 + カラーラベル (ブルー)     |     |
| <b>717-002-52</b> | 15.300.283PR  | 本体 + カラーラベル (レッド)     |     |
| <b>717-002-53</b> | 15.300.284PG  | 本体 + カラーラベル (グリーン)    |     |
| <b>717-002-54</b> | 15.300.285PY  | 本体 + カラーラベル (イエロー)    |     |
| <b>717-002-55</b> | 15.300.286PO  | 本体 + カラーラベル (オレンジ)    |     |
| <b>717-002-56</b> | 15.300.287PGY | 本体 + カラーラベル (ライトグレー)  |     |
| <b>717-002-57</b> | 15.300.288PW  | 本体 + カラーラベル (白色無地)    |     |
| <b>717-002-58</b> | 15.300.289PAC | 本体 + インジケータ付ラベル (AC用) |     |
| <b>717-002-59</b> | 15.300.171PEO | 本体 + インジケータ付ラベル (EO用) |     |

標準価格  
~~¥107,000~~

期間限定標準価格  
**¥48,000**

●本体サイズ：約W60×L270×H120mm ●本体重量：約440g ●ラベル入数：1箱(750枚×12巻入) ●インクロール1個付



ガイドラインに準拠した  
滅菌物のリコールシステムを  
低コストで構築します!!

ラベルガンシステム  
スターターセット

キャンペーン期間

2018年4月1日 » 6月30日



キャンペーン内容：

本体+ラベル1箱

期間限定標準価格にてご提供いたします!

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色と実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360  
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641  
東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122  
仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501  
金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116  
村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930  
広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363

# 滅菌物のリコール対策

## 目 的

生物学的インジケータ(biological indicator : BI)の陽性判定によって滅菌工程の不具合を検知した場合、該当滅菌器で処理した滅菌物は、BIが最後に陰性を示した滅菌工程以降の滅菌工程で処理された滅菌物は滅菌されていないと判断し、すべての滅菌物がリコールの対象となる。リコールを徹底するために、滅菌包装の外面などに、滅菌年月日、滅菌方法、滅菌ロット番号、使用滅菌器、作業者などの識別表示をすることが望ましい。

## リコール準備と対応

滅菌不良が疑われる場合は供給部門責任者あるいは、適切な代理人の判断と指示の下、リコールのマニュアルにしたがって速やかにリコールをおこなう

マニュアルには以下の点について明記しておく


- (1)リコールがおこなわれた場合の該当滅菌器の使用停止
- (2)使用部門の医師・看護師への連絡方法と内容
- (3)リコール対象の滅菌物が使用された、またはその疑いのある患者への対応(経過観察など)

## BI陽性判定後のリコール範囲

1時間判定BIを1日1回使用する場合の対象範囲

|     | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1日目 |      |      | 滅菌物  | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  |
| 2日目 |      | 滅菌物  | BI培養 | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   | BI培養  | 滅菌物   |

## リコール対象滅菌物の特定

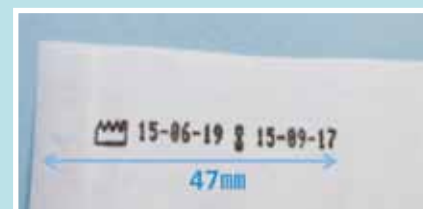

### ヒートシーラーの印字情報

滅菌日  
滅菌有効期限  
ロット番号  
使用滅菌器  
作業者情報



すべての滅菌物を  
調べなきゃ!

小さい文字に  
同じ外観...

そもそも使用した  
滅菌器まで記載してた?

回収完了に一体  
何時間かかるの?



## メディカルハンドラベラー

Medical Hand Labeler

## 軽量でコストパフォーマンスに優れたシングルシステム!!

- ① 軽量で使いやすくコンパクトなデザイン。
- ② コストパフォーマンスに優れたシングル(1重)ラベル。
- ③ 6種類のカラーラベルで用途別に対応。



## ラベルガン Premium

Label Gun Premium

## 2重シール構造により、患者への使用履歴管理にも対応します!!

- ① 患者への使用履歴管理(トレーサビリティ)のため、2重シール構造を採用していますので使用後の記録・保管も簡単です。
- ② 9種類のラベルを使い分けることで対象物の回収をより容易に!

## カラーラベルの活用

### 中央材料室



滅菌装置①  
BI陰性  
滅菌OK!



滅菌装置②  
BI陽性  
リコール発動!



滅菌装置③  
BI陰性  
滅菌OK!

### 病棟・外来

