



HEINE ダーマトスコープ
Dermatoscope Catalogue





HEINE ダーマトスコープ
Dermatoscope Catalogue



LINE UP

- 01 | HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット 3
- 02 | HEINE NC2 LEDダーマトスコープ 5
- 03 | HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット 7
- 04 | HEINE iC1 LEDダーマトスコープセット 9

HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット

ワンタッチで偏光と非偏光に切り換わる照明と 視野周縁部まで歪みのないクリアな画像

コンタクトプレートを付け換える必要がないため、偏光と非偏光の照明を連続で繰り返すことにより、
弊社従来品より正確な診断ができるようになります。またデジタル一眼レフカメラに接続し鮮明な写真撮影を実現。

4つの高性能LED

明るく均一性のある照明は、演色性が
高く自然な色を再現します。

アクロマティックレンズ採用

2枚のアクロマティックレンズを組み合
わせることでレンズ周囲の歪みを修正
して視野周縁部までクリアな画像が得
られます。



LED NOW


LED NOW IN HEINE QUALITY.

偏光・非偏光切換スイッチ

左右にある偏光・非偏光切換スイッチのどちらかを押すことで、偏光⇄非偏光の照明に切り換えることができます。
※電源投入直後は常に偏光仕様です。



<観察像の例>

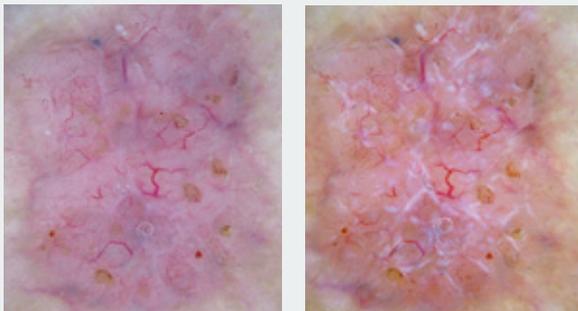

非偏光仕様

偏光仕様

HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット

注文コード	品番	標準価格
136-060-89	K262.10.118	¥230,000

仕 様

光源	白色LEDランプ 4個	レンズ径	約φ23mm
照度	約30,000lx	倍率	約10~16倍
色温度	約5,000K	重量	約400g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra≥80	電源	単2形アルカリ乾電池2本
レンズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約8時間

[セット内容]

DELTA20T LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、専用ハードケース、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)

一般医療機器
特定保守管理医療機器
届出番号:27B1X00024000023
販売名:ハイネ診断用器具セット

別売品

① 一眼レフカメラアダプター SLR-C(キャノン)

注文コード	品番	標準価格
136-061-91	K000.34.185	¥96,000

キャノン デジタル一眼レフカメラに接続可能

② 一眼レフカメラアダプター SLR-N(ニコン)

注文コード	品番	標準価格
136-061-92	K000.34.186	¥96,000

ニコン デジタル一眼レフカメラに接続可能

③ アダプターコード

注文コード	品番	標準価格
136-061-23	X000.99.231	¥9,800

DELTA20T LEDのヘッド部とハンドル部の間に接続することにより、ハンドル部の重さが軽減され使い勝手が良くなります(長さ1.3m)

④ コンタクトプレート(スケールなし)

注文コード	品番	標準価格
136-089-23	K000.34.217	¥33,000

スケールなしコンタクトプレート(プレート直径:23mm)

⑤ スモールコンタクトプレート

注文コード	品番	標準価格
136-089-17	K000.34.205	¥19,000

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています(プレート直径:8mm)




補充品

④A コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品番	標準価格
136-089-22	K000.34.216	¥35,000

1cm(1mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます(プレート直径:23mm)

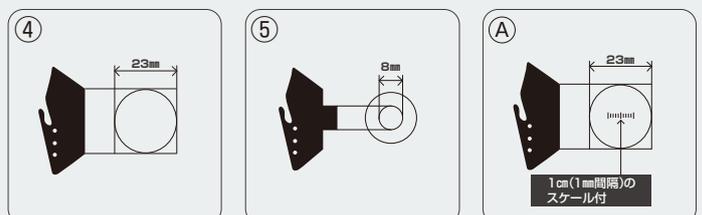

HEINE NC2 LEDダーマトスコープ



コンタクトフリーの皮膚検査鏡

患者に接触する事なく、診断が可能。
約φ27mmの広い被写界深度で
6倍の倍率で診断できます。



偏光照明

乱反射をおさえて、結晶構造や血管構造を細部まで観察することができます。



コンタクトプレート

接触診断用のコンタクトプレートを併用して、10倍の倍率(iPhone接続時30倍のデジタルズーム可能)でより詳細な画像が得られます。

LED HO

LED NOW IN HEINE QUALITY.

演色性の高い照明と使いやすさを実現した 非接触型のダーマトスコープ

NC2 LEDダーマトスコープは皮膚接触や消毒を行うことなく、非接触での診断ができます。

コンタクトプレートを併用して接触診断に変更することができます。

またハイネクオリティのLEDの照明は演色性が高く、より自然な色を再現します。

専用カバーケースを換えることでiPhone6/6S/7/8*に対応できます。

*…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



HEINE NC2 LEDダーマトスコープ

注文コード	品番	標準価格	
136-061-97	D841.78.120	¥180,000	
仕 様			
光源	LEDランプ 2個	レ ン ズ 径	約φ27mm
照 度	約20,000lx	倍 率	約6倍/10倍(非接触/接触)
色 温 度	約5,000K	重 量	約180g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra≥80	電 源	リチウムイオン電池
レ ン ズ	偏光レンズ	使 用 時 間	約90分 (満充電時、連続使用不可)

[セット内容]

NC2 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、NC2 装着ボード、ACアダプター、USBケーブル、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)



無料アプリ「HEINE NC2」は
こちらよりダウンロードできます



別売品 iPhone 使用例



コンタクトプレート未装着 コンタクトプレート装着時

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000393
販 売 名: HEINE NC2 LEDダーマトスコープ

別売品

専用カバーケース

注文コード	品 番	対応機種	標準価格
136-061-81	D000.78.127	iPhone7/8	¥5,000
136-061-82	D000.78.126	iPhone6/6S	¥5,000

補充品

コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品 番	標準価格
136-061-98	D000.78.114	¥24,000

1cm(1mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます(プレート直径:22mm)

USBケーブル

注文コード	品 番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000

HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



ポケットに収まるコンパクトデザイン

HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット

注文コード	品番	標準価格
136-041-21	D887.78.021	¥50,000

- ・ポケットヘクリップをかけると電源がOffになります
- ・病変部を10倍に拡大して観察ができ、視度調整機能で簡単にピント調整が可能

仕様

光源	白色LEDランプ 1個	レンズ径	約φ23mm
照度	約4,000lx	倍率	約10倍
色温度	約4,000K	重量	約180g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra>95	電源	単3形アルカリ乾電池2本
レンズ	ノーマルレンズ	連続使用時間	約10時間

※ 超音波ゼリーを使用します。

[セット内容]

ミニ3000LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケールなし)、専用ソフトケース、色素性皮膚病変の診断方法の概要(冊子)

一般医療機器
特定保守管理医療機器
届出番号:27B1X00024000023
販売名:ハイネ診断用器具セット

別売品

① スモールコンタクトプレート

注文コード	品番	標準価格
136-060-94	K000.34.008	¥15,000

指の間や耳介など狭い部位の病変の観察に適しています。
(プレート直径:8mm)

② コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品番	標準価格
136-088-03	D000.78.117	¥10,400


1cm(0.5mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます。
(プレート直径:23mm)

補充品

Ⓐ コンタクトプレート(スケールなし)

注文コード	品番	標準価格
136-088-02	D000.78.116	¥4,200

(プレート直径:23mm) (ミニ3000LEDダーマトスコープに標準付属されています)

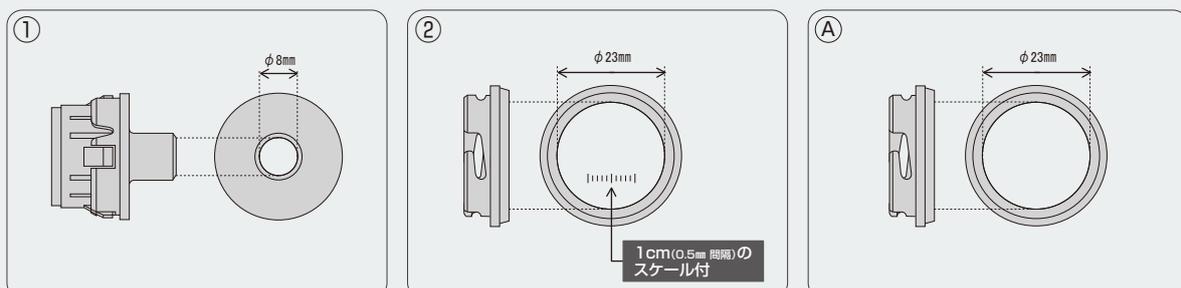

HEINE iC1 LEDダーマトスコープセット



LED HO

LED NOW IN HEINE QUALITY.



4つの高性能LED

明るく均一性のある照明は、演色性が高く自然な色を再現します。

撮影した画像をスクリーンですぐ確認できます

アプリ使用時最大15倍^{*1}(iPhone内表示時:最大40倍まで拡大可能)まで拡大でき、12メガピクセル^{*1}のイメージ品質を提供します。専用カバーケースを換えることでiPhone5/5S/SE/6/6S/7/8^{*2}に対応できます。USBで充電可能です。

^{*1}…iPhone6使用時

^{*2}…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

機能:

- 無料アプリ「HEINE iC1」を使用
- ボディーマップに患部画像を記録
- 患者情報の入力
- メールにて画像や情報を共有
- コメント欄あり
- アプリ内倍率…15倍



無料アプリ「HEINE iC1」はこちらよりダウンロードできます



偏光・非偏光切換スイッチ

上下にある偏光・非偏光切換スイッチのどちらかを押すことで偏光⇄非偏光の照明に切り換えることができます。

※電源投入直後は常に偏光仕様です。

HEINE iC1 LEDダーマトスコープセット

注文コード	品番	対応機種	標準価格
136-061-14	K271.28.305	iPhone5/5S/SE	¥230,000
136-061-15	K270.28.305	iPhone6/6S	¥230,000
136-061-16	K273.28.305	iPhone7/8	¥230,000

仕様

光源	白色LEDランプ 4個	レンズ径	約φ23mm
色温度	約5,000K	倍率	最大15倍
演色評価数(CRI)	Ra≥80	電源	バッテリー内蔵
レンズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約3.5時間(満充電時)


[セット内容]

iC1 LEDダーマトスコープ、
コンタクトプレート(スケール付)

一般医療機器

届出番号: 27B1X00024000369

販売名: HEINE iC1 LEDダーマトスコープ

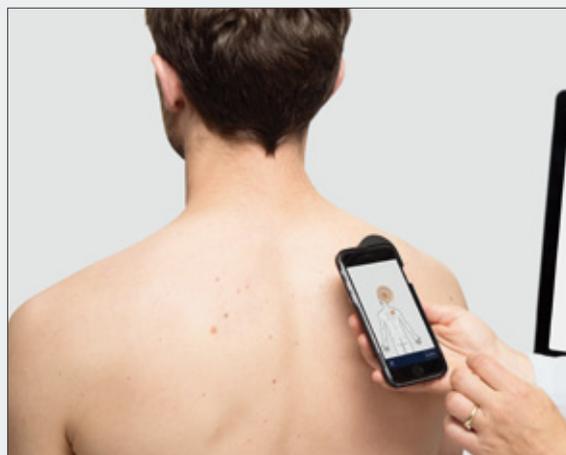

使用例

別売品

USBケーブル

注文コード	品番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000

iC1 LEDダーマトスコープ専用カバーケース

注文コード	品番	対応機種	標準価格
136-089-25	K000.34.250	iPhone6/6S	¥5,000
136-089-26	K000.34.251	iPhone5/5S/SE	¥5,000
136-089-27	K000.34.252	iPod touch第6世代	¥5,000
136-089-28	K000.34.253	iPhone7/8	¥5,000

補充品

コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品番	標準価格
136-089-24	K000.34.201	¥35,000

1cm(1mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます(プレート直径:23mm)

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363