



Famos ローターヒートシーラー F110DEP-P

Famos
ロータリーヒートシーラー F110DEP-P

ISO
11607-2
適合



ローラーテーブル

※ローラーテーブルは別売です。

ユーザーフレンドリー

日本語に対応したディスプレイの採用により滅菌日、有効期間、ロット情報などをどなたでも簡単に設定できます。



滅菌バッグに印字する有効期間、日付、ロット番号の設定



滅菌バッグに印字するマーク、滅菌日、文字の大きさ、印字の有無を設定

省電力設計

蓄熱性に優れたヒートバーを採用。

パラメータ監視システム装備


シーリングの重要なパラメータである **温度・圧力・速度** の3要素があらかじめ設定した規定値に適合していることを自動監視し、監視情報は次の4つの方法で確認できます。
万一の異常発生時にはディスプレイとエラー音を通じてお知らせします。

1 ディスプレイ



ディスプレイの専用画面を通じてリアルタイムでパラメータを確認できます。

2 印字情報

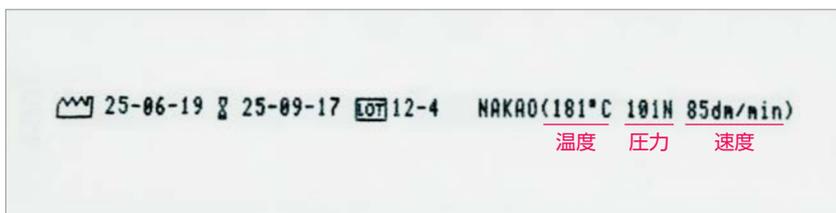

滅菌バッグに直接印字できるので装置のコンディションを簡単に記録できます。

3 USBポート



F110DEP-Pに標準装備されたUSBポートにUSBフラッシュドライブを取付けることで監視情報をテキストファイル形式で記録・保存できます。

4 専用ソフトウェア



RS-232CポートとPCを付属のケーブルで接続することで専用ソフトウェア※を使って監視情報をリアルタイムで見ることができます。

※付属のUSBフラッシュドライブよりインストールしてください。
※対応OS … Windows 10/11

Famos ロータリーヒートシーラー F108

Famos
ロータリーヒートシーラー F108

ISO
11607-2
適合



ローラーテーブル

※ローラーテーブルは別売です。

省スペース設計のコンパクトシーラー

温度・圧力・速度のパラメータ管理機能を搭載しています。
USBフラッシュドライブ*を取付けることで監視情報をテキストファイル形式で記録・保存できます。
専用ソフトウェア*を使って監視情報をリアルタイムで見ることができます。

*別売品です。

省スペース設計



ディスプレイ



*表示言語は英語のみです。

機能比較

	従来品 F110	コンパクトタイプ F108
テキスト印字機能	●	
パラメータ管理	●	●
ソフトウェア(テキスト)	●	
ソフトウェア(モニタリング)	●	●
USBポート	●	●

Famos ローラーヒートシーラー 仕様

製品写真		
規格	F110DEP-P	F108
注文コード	717-005-01	717-005-11
品番	30.100.577	30.100.561
サイズ	(本体)約W527×D314×H162mm (ローラーテーブル)約W705×D425×H75mm	(本体)約W438×D289×H162mm (ローラーテーブル)約W620×D420×H75mm
セットサイズ	約W705×D645×H162mm	約W620×D625×H162mm
材質	ステンレス	
重量	(本体)約15kg (ローラーテーブル)約4.1kg	(本体)約12kg (ローラーテーブル)約3.5kg
電源	AC90-120V 50-60Hz	
消費電力	(最大)365W/(平均)70W	
温度設定範囲	50~199℃	
シール幅	12mm	
シール送り速度	8.5±5%/分	
印字機能	(表示文字)絵文字/アラビア数字 (印刷項目)シール時の温度・圧力・速度 滅菌日(包装日)、有効期間(滅菌有効期間)、コード番号(ロット番号など) (日付表示設定)DMY=日・月・年、YMD=年・月・日、MDY=月・日・年(選択)	— (印字機能無し)
入力方式	テンキー入力	— (印字機能無し)
ディスプレイ表示	日本語(カタカナ)表示	日本語非対応(英語表示あり)
その他	デジタルメニューコントロール マイクロプロセッサコントロール オーバーヒート防止装置付	
適応	ラミネート包装紙、滅菌バッグおよび紙製包装袋、タイベック製品	
付属品	RS-232Cケーブル、USBフラッシュドライブ	
標準価格	¥1,200,000	¥750,000

■別売品：ローラーテーブル

注文コード	717-005-02	717-005-12
品番	30.100.619	30.100.647
標準価格	¥190,000	¥150,000

■別売品：USBシリアル変換アダプター

注文コード	717-003-05
品番	USB-RSAQ7R
標準価格	¥8,700

※USBシリアル変換アダプターをご使用の際はアダプターに付属されている取扱説明書に記載のホームページよりアプリケーションをダウンロードしてください。

■補充品：インクリボン(F110DEP-P用)

注文コード	717-001-03	— (印字機能無し)
品番	SZ-11360	— (印字機能無し)
標準価格	¥2,400	— (印字機能無し)

Famos シールテスト

滅菌バッグのシーリングの完全性を
目視で日常点検できます。

- シーリングの完全性、密着性が確保されているか目視で確認できます。
- 点検日や判定結果などの情報を記入できます。
- 点検後は記録として保管することができます。
- 対応シーラー：ロータリー型、インパルス型
- 対応滅菌バッグ：オートクレーブ滅菌用、EOG滅菌用、過酸化水素滅菌用



ご使用方法詳細は
読み込みまたはクリックで
ご覧いただけます。



注文コード	品番	サイズ	入数	標準価格
717-005-04	15.300.043	174×74mm	1箱(250枚入)	¥30,000

Famos ダイテスト

インクの漏出の有無によりシーリングの
完全性を目視点検できます。

- シーリングの完全性、密着性が確保されているか目視で確認できます。
- インクがパウチに封入されているため手指や衣類が汚れにくいです。
- REACH規制に基づきTriton X-100を使用していません。
- 対応シーラー：ロータリー型、インパルス型
- 対応滅菌バッグ：オートクレーブ滅菌用、EOG滅菌用、過酸化水素滅菌用



ご使用方法詳細は
読み込みまたはクリックで
ご覧いただけます。



注文コード	品番	サイズ(1個あたり)	入数	標準価格
717-005-05	24.900.861	155×45mm	1箱(30個入)	¥18,000

ヒートシーラー架台 & システム作業台



セット例

🔗 ヒートシーラー架台

注文コード	品番	標準価格
080-237-69	PR-824-B	¥160,000

■ 補充品：ワイヤーバスケット

注文コード	品番	規格	標準価格
080-237-73	PR-826-L	大	¥27,500
080-237-72	PR-826-S	小	¥24,000

サイズ	W700×D650×H800mm
下段棚有効サイズ	W616×D350×H450mm
材質	(本体)ステンレス (天板)メラミン化粧板
耐荷重	80kg
キャスター	φ75mm、前面ストッパー
付属品	バスケット(大)W625×D303×H250mm バスケット(小)W625×D211×H130mm



セット例

🔗 ヒートシーラー架台

注文コード	品番	標準価格
080-237-68	PR-824-A	¥254,000

■ 補充品：ワイヤーバスケット

注文コード	品番	規格	標準価格
080-237-73	PR-826-L	大	¥27,500

サイズ	W900×D650×H850mm
補助板サイズ	W350×D650(床からの高さ700mm)
引出有効サイズ	W362×D406×H103mm×2個
下段棚有効サイズ	W836×D350×H420mm
材質	ステンレス
耐荷重	80kg
キャスター	φ75mm、前面ストッパー
付属品	バスケット(大)W625×D303×H250mm



セット例

🔗 システム作業台

注文コード	品番	標準価格
080-237-70	PR-825-A	¥355,000
080-237-71	PR-825-B	¥388,000

■ 補充品：ワイヤーバスケット

注文コード	品番	規格	標準価格
080-237-73	PR-826-L	大	¥27,500

PR-825-A 仕様

サイズ	W1200×D675×H1600mm
棚サイズ	W535×D270mm 上段仕切板4枚 39mmピッチ/下段仕切板3枚 39mmピッチ
引出し有効サイズ	W500×D405×H103mm×2個
下段棚有効スペース	W1116×D350×H450mm
カゴサイズ	W485mm
バッグ入れサイズ	W470mm
ロール入れサイズ	W440mm

PR-825-B 仕様

サイズ	W1500×D675×H1600mm
棚サイズ	W675×D270mm 上段仕切板4枚 50mmピッチ/下段仕切板3枚 50mmピッチ
引出し有効サイズ	W408×D405×H103mm×3個
下段棚有効スペース	W1416×D350×H450mm
カゴサイズ	W625mm
バッグ入れサイズ	W600mm
ロール入れサイズ	W575mm

共通仕様

テーブル高	850mm
材質	(本体)ステンレス (天板)抗菌メラミン化粧板
耐荷重	70kg
キャスター	φ75mm、前面ストッパー
付属品	ステンレスワイヤーバスケット(大)W303×D625×H250mm

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。

※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

東 京 支 店 ☎03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
札幌営業所 ☎011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
埼玉営業所 ☎048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎050-2018-1030 (代) FAX076-239-2005
名古屋営業所 ☎052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
近畿営業所 ☎050-2018-3372 (代) FAX0725-53-5643
北大阪営業所 ☎06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006
米子営業所 ☎0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎082-532-1800 (代) FAX082-233-8818
福岡営業所 ☎092-473-0123 (代) FAX092-474-1363